

سيمبيكورت توربوهاالر

٨٠/٤,٥ ١٦٠/٤,٥ ٣٢٠/٩ مكغ/شهقة^١

إفتح

دور

واستنشق

سيمبيكورت توربوهاالر هو عبارة عن منشقة متعددة المقادير الدوائية التي تزود كميات قليلة جداً من المسحوق. عند الإستنشاق عبر التوربوهاالر، ينتقل المسحوق إلى الرئتين. لذا من المهم الإستنشاق بعمق وبقوة عبر الفوهة.

يجب نزع الغطاء بتدويره.
يُسمع صوت طقطقة عند نزع الغطاء.



يجب مسك المنشقة عمودياً بحيث يكون المقبض الأحمر في الأسفل. لا يجوز مسك الفوهة عند تدوير المقبض. لشحن المنشقة بمقدار دوائي يجب تدوير المقبض قدر الإمكان بإتجاه واحد ومن ثم في الإتجاه المعاكس ما أمكن. ليس من المهم لأي إتجاه يتم التدوير أولاً. في نهاية هذه المسيرة تسمع صوت طقة. (عند تحضير منشقة جديدة للإستعمال يجب إجراء المسيرة مرتين). المنشقة الآن مشحونة وجاهزة للإستعمال. يجب الزفر خارجاً. لا يجوز الزفر عبر الفوهة.



يجب وضع الفوهة بلطف بين الأسنان، أطبق شفطيك واستنشق عبر الفم، شهقة عميقة وقوية.

إذا وصف أكثر من شهقة واحدة للعلاج، يجب تكرار المراحل ٢-٤.

يجب إعادة الغطاء إلى مكانه بواسطة اللولبة بإحكام.

يجب شطف الفم بالماء. لا يجوز البلع.

يجب تنظيف الجزء الخارجي للفوهة بشكل دائم (مرة في الأسبوع) بمنديل ورقي جاف.

لا يجوز إستعمال الماء أو سوائل أخرى لتنظيف الفوهة.

تنظيف المنشقة :

Symbicort®
budesonide/formoterol

Turbuhaler


تعليمات الإستعمال

موقع ارشاد:
Mysymbicort.co.il
كلمه السر: לנשומ



SCAN ME

متى يجب التبديل لمنشقة جديدة؟

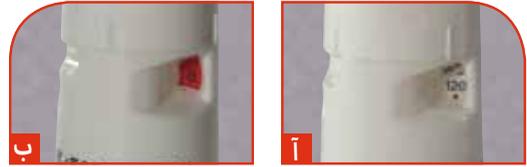

- يُظهر مؤشر المقادير الدوائية (الصورة أ) كمية المقادير الدوائية المتبقية في المنشقة، يبدأ من 60 أو 120 عندما تكون ممثلة.
- يشير مؤشر المقادير الدوائية بفواصل ذات 10 مقادير دوائية لذلك لا يُظهر كل مقدار دوائي مشحون. يمكنك الوثوق بأن التوربوهاالر يعطي المقدار الدوائي على الرغم من عدم رؤيتك لحركة مؤشر المقادير الدوائية.
- عندما ترى لأول مرة إشارة حمراء في طرف نافذة المؤشر، تبقى تقريباً 20 مقدار دوائي. خلفية مؤشر المقادير الدوائية لـ 10 المقادير الأخيرة هي حمراء. عندما يصل الصفح وسط النافذة (صورة ب) يجب التخلص من المنشقة.
- إنتبه من فضلك بأنه حتى عندما يشير مؤشر المقادير الدوائية إلى 0 (صفر) لا يزال بالإمكان تدوير المقبض، لكن المؤشر يتوقف عن التحرك ويبقى الصفح في النافذة.
- إن الضجيج الذي يُسمع عندما تقوم بخض المنشقة لا يصدر عن الدواء إنما عن المادة المجففة. لذلك، لا يشير الضجيج إلى كمية الدواء المتبقي في التوربوهاالر.
- إذا قمت بالخطأ بإجراء عملية شحن أكثر من مرة واحدة قبل إستعمال المقدار الدوائي، فما زلت ستحصل على مقدار دوائي واحد فقط. يسجل مؤشر المقادير الدوائية كل المقادير الدوائية التي تم شحنها.
- لا يزال بالإمكان التدوير وسماع "طقة" حتى عند نفاذ المقادير الدوائية من المنشقة.

يجب قراءة نشرة المستهلك قبل الإستعمال.

The information is correct as of December 2018.

For further questions, ask your pharmacist or your treating physician.

Reference:

- Symbicort® Turbuhaler® Prescribing Information (80/4.5, 160/4.5, 320/9 mcg/inhalations) approved by MOH.

Side effects can be reported by clicking safety.Israel@astrazeneca.com

AstraZeneca

Symbicort® is a registered trademark of the AstraZeneca Group of Companies. The AstraZeneca logo is a trademark of the AstraZeneca Group of Companies.

AstraZeneca Israel. 1 Atir Yeda Street., Building O-Tech-2 P.O.B. 8044 Kfar Saba, 4464301 Israel Tel: 09-7406528 Fax: 09-7406527